

Santé

PAR LES

Energie


Appareils à Rayons Violets
et
Ozone de la Haute Fréquence
des
GUERISONS MIRACULEUSES

ont été et sont obtenues tous les jours, où toutes autres

méthodes avaient échoués

Tél. 33.89.23

Rég. du Com :
78.077

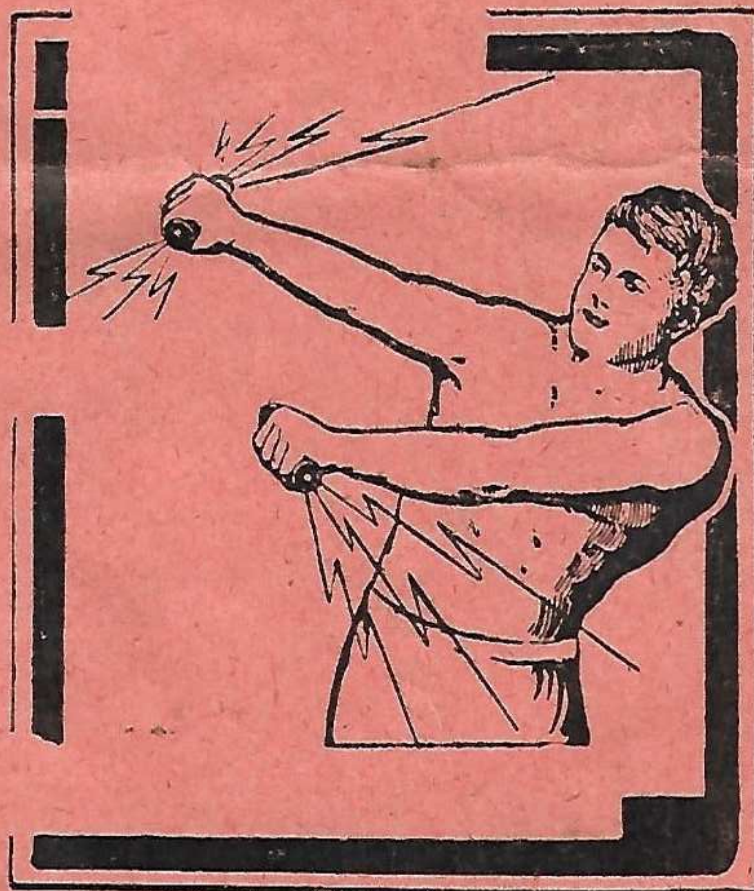

**Chèques
Postaux**

Belgt : 100.580

Grand Duché
5.476

Paris : 170.020

L'Energico Médical

Force


Avenue de Cortenberg 10

BRUXELLES

Vigueur

Nos appareils sont de fabrication Belge et ROBUSTE, puisque nous les garantissons DEUX ANS. De présentation luxueuse, transportable et fonctionnant sur tous courants, (continu et alternatif) et sur tous voltages.

Il ne faut donc pas confondre avec des appareils similaires, mais de qualité médiocre, de provenance étrangère, qui sont mis en vente à vil prix et n'offrant aucune garantie sérieuse.

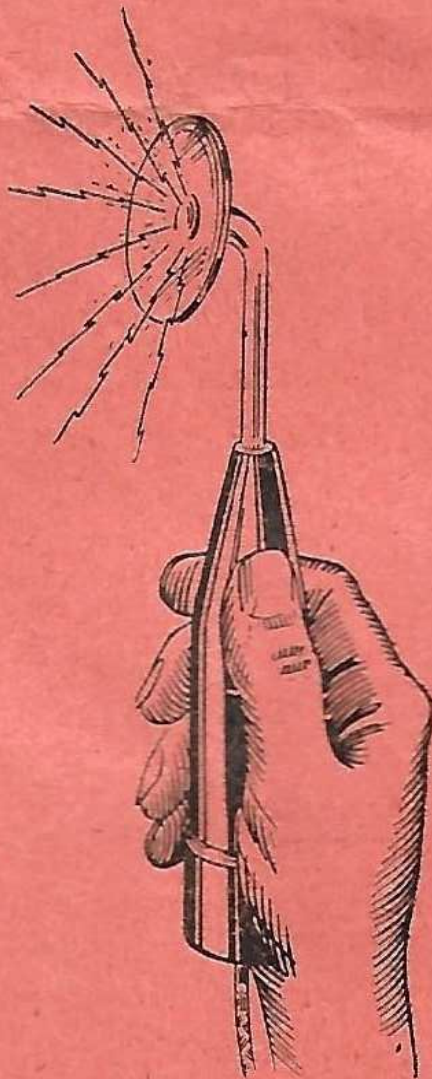

Appareils pour Haute Fréquence

« Energico-Médical »



Les appareils produisent le véritable courant à haute fréquence. Leur emploi ne provoque pas de secousses et ne cause pas de souffrance. Ils rendent de grands services pour le traitement d'un grand nombre d'affections médicales.

TOUS LES APPAREILS SONT GARANTIS D'UN BON FONCTIONNEMENT.

RAPPORTS GENERAUX DE L'ELECTRICITE AVEC LA SANTE

Afin d'entretenir une réserve de force pour les besoins journaliers de la vie et de maintenir l'équilibre entre la déperdition et le réapprovisionnement, une certaine somme de sommeil, de nourriture, d'air pur et d'exercice est absolument nécessaire; supprimer l'une de ces conditions, cherchez à tergiverser au delà d'un certain point et vous dérangez l'équilibre; la réserve de force s'épuise graduellement et, au bout de quelques temps, la maladie et l'invalidité chronique sont forcées de survenir. Mais on a un remède contre la PERTE DE FORCE VITALE.

L'électricité est à la fois tonique et calculée.

Elle tonifie et calme les nerfs dès qu'ils sont soumis à son influence. Elle rend leur action normale à l'estomac, aux poumons, au coeur, au foie, aux reins, à la vessie, à l'utérus; aux ovaires et à tous les muscles. Elle purifie le sang, désinfecte toute matière impure qui peut séjourner dans le système, et aide les organes à les expulser du système par les canaux qui y sont destinés, soulage la douleur locale en supprimant les causes qui la produisent et en fortifiant le système entier, comme ne peut le faire aucun remède connu de la science.

Le courant de haute fréquence stimule la nutrition, augmente la combustion intérieure, brûle les déchets organiques, régularise les fonctions de l'appareil circulatoire et, enfin, agit en souverain maître avec une autorité incontestable et incontestée sur toutes

Il modifie la valeur du fluide nerveux, excite et stimule les lymphatiques, les obèses, les affaiblis, les déprimés, calme; adoucit; régularise les hyperexcités, les sanguins et les agités.

Tonifie les muscles, va masser leurs fibres jusqu'au sein de l'organisme et, grâce au transport moléculaire spécialement obtenu par le courant à haute fréquence, épure et assainit le sang

L'électricité s'attaque directement, non à l'effet, mais à la cause du mal.

L'électricité dispense presque toujours de l'usage interne des médicaments et en supprime les inconvénients et les conséquences parfois très graves.

Lorsque, dans une localisation rebelle, l'électricité ne suffit pas par elle-même, elle permet de faire pénétrer, avec elle et directement dans l'organe malade, la médication utile, sans la faire passer par l'estomac.

L'expérience nous a souvent démontrée que bien des malades hésitaient à se faire traiter par cette méthode suite d'une certaine crainte de l'électricité. Cette crainte n'est plus justifiée actuellement, car la science électrothérapique a fait des progrès énormes et est arrivée, pour ainsi dire, à son point culminant.

Grâce aux appareils perfectionnés de l'Auxiliaire Electrique, toutes les applications médicales de l'électricité sont devenues agréables et douces, tout en obtenant le summum d'efficacité et de puissance.



OBSERVATIONS

L'isolement des électrodes a pour but de prévenir un déchargement prématuré des courants de haute fréquence et permet en même temps à ceux-ci de donner tout leur rendement aux endroits désirés.

Eviter l'emploi des appareils de haute fréquence immédiatement après un lavage du corps ou des cheveux avec des solutions alcooliques, car il y aurait danger de brûlures.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux appareils qui s'imposeraient dans la suite.

REMARQUE IMPORTANTE. — Les électrodes pour les cavités du corps **doivent être introduites et enlevées pendant que l'appareil se trouve à l'arrêt complet.** Après l'introduction de ces électrodes on augmente l'intensité du courant graduellement en tournant le bouton de réglage.

Le **nettoyage** et la **stérilisation** des électrodes se font au moyen d'une savonnée ou d'alcool.

Le traitement par la haute fréquence en général n'exerce

TABLEAU DE TRAITEMENT

Beaucoup de maladies résistant aux médications sont guéries par les courants de haute fréquence, ce traitement électrique en général, apporte toujours une aide à l'organisme pour lutter contre les troubles et retarder le plus possible l'évolution du mal ou tout au moins l'amoindrir. Nous n'avons pas la prétention d'affirmer que toutes les affections, dont nous donnons la liste, peuvent être guéries par l'électricité, il est malheureusement des maladies incurables, rebelles à tout traitement.

ABCES. — Si l'abcès est en formation, massez pendant cinq minutes sa surface et les contours trois fois par jour avec l'électrode n. 1. S'il ne régresse, fulgurez pendant quelques secondes avec l'électrode n. 9. Il ne tardera pas à s'ouvrir.

ACNE. — Faire plusieurs massages quotidiens de cinq minutes avec l'électrode n. 27 jusqu'à assèchement et guérison.

ADENITE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14 contact de l'électrode n. 1 sur les ganglions, sans étincelles, cinq minutes deux fois par jour. Continuer à suivre le traitement du médecin.

ALGIES. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14 soigner le membre malade tout entier avec l'électrode n. 2 deux minutes trois fois par jour.

ALOPECIE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, se faire masser doucement le cuir chevelu par une autre personne.

AMENORRHEE. — Introduire l'électrode n. 18 dans le vagin, mettre l'appareil en marche, traitement de trois minutes, arrêter l'appareil, retirer ensuite l'électrode (ne pas confondre avec la grossesse).

ANEMIE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, effluer la colonne vertébrale avec l'électrode n. 3, et faire des inhalations d'ozone plusieurs fois par jour.

ANGINE. — Traitement avec l'électrode n. 6 cinq minutes,

ANGINE DE POITRINE. — Traitement avec l'électrode n. 8 au niveau du cœur, cinq minutes deux fois par jour, intensité faible.

APHONIE NERVEUSE. — Traitement précieux pour les chanteurs, massage extérieur de la gorge avec l'électrode n. 6, cinq minutes. (voir fig. 1)



(fig. 1)



(fig. 2)

ARTHRITISME. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14 le matin à jeûn et le soir cinq minutes, effluve avec l'électrode n. 2.

ASTHME. — Faire des inhalations d'ozone brèves, mais fréquentes, électrode n. 28 (voir fig. 3)



(fig. 3)

ARTERIO - SCLEROSE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, cinq minutes, effluves douces le long de la colonne vertébrale avec l'électrode n. 3. (voir fig. 5)



(fig. 4)

BOUTONS. — Faire plusieurs massages quotidiens de cinq minutes avec l'électrode n. 27.

BRONCHITE. — Plusieurs inhalations d'ozone par jour avec l'électrode n. 28, effluves sur la poitrine et le dos à l'aide de l'électrode n. 1 cinq minutes (voir fig. 4).

BRULURES. — Effluves avec l'électrode n. 1, courant faible.

COEUR. — Traitement avec électrode No 8 au niveau du cœur cinq minutes, deux fois par jour, intensité faible.

COMEDONS. — Etinceler chaque point noir avec l'électrode n. 9.

CONSTIPATION. — Effluves sur l'abdomen avec l'électrode n. 2 cinq minutes. Utiliser l'électrode rectale n. 20, 21 ou 23, in-

CORPS. — Bain d'eau savonneuse chaude, étinceler ensuite avec l'électrode n. 9.

CRAMPES. — Effluves avec l'électrode n. 2, intensité moyenne dix minutes.

DENTS. — Contre l'inflammation des gencives et l'abcès, se servir d'une électrode appropriée par sa forme à la configuration de la partie malade (Voir électrodes dentaires).

DIABETE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14 le matin à jeûn et le soir dix minutes.

ENTORSE. — Traitement avec l'électrode n. 2, intensité forte trois fois par jour dix minutes.

ECZEMA. — Effluves avec l'électrode n. 2 dans les formes prurigineuses plusieurs fois par jour cinq minutes.

ESTOMAC. — Effluves avec l'électrodes n. 2 plusieurs fois par jour, intensité moyenne.

PHLEBITE. — Effluves avec l'électrode n. 2 plusieurs fois par jour, intensité moyenne.

FURONCLE. — Même traitement que pour l'abcès.

GOUTTE. — Voir arthritisme.

GRIPPE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, dix minutes. Plusieurs inhalations d'ozone avec l'électrode n. 28.

HEMORRHOIDES. — Introduire l'électrode n. 20, 21 ou 23 vaselinée, cinq minutes, intensité moyenne.

HYSTERIE. — Effluves à la nuque et la poitrine avec l'électrode n. 2. Employer l'électrode n. 17, 18 ou 19.

IMPUISSANCE. — Effluves à la colonne vertébrale avec l'électrode n. 3 ensuite chez l'homme faire le traitement externe des parties sexuelles, intensité faible, avec l'électrode n. 1, pour la femme, traitement avec l'électrode n. 17, 18 ou 19.

LUMBAGO. — Passer l'électrode n. 2 sur la région douloureuse en l'immobilisant quelques secondes sur les points particulièrement sensibles. Dix minutes deux fois par jour.

MASSAGE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14 pendant qu'une autre



Fig. 5.

personne masse à la main le groupe musculaire, l'abdomen, etc (Voir fig. 5).

METRITES. — Application de l'électrode n. 19 cinq minutes tous les deux jours.

MAUX DE TÊTE. — Effluves sur le front et les tempes avec l'électrode n. 1. Massage de la nuque avec l'électrode n. 6.



Fig. 6.



Fig. 7.

MAUVAISE CIRCULATION DU SANG. — Traitement de saturation le matin à jeûn avec l'électrode n. 14. Massage général du corps avec l'électrode n. 1.

NEURALGIES. — Effluves rapides sur la peau avec l'électrode n. 2, cinq minutes.

MALADIES DU NEZ. — Introduire l'électrode n. 11 à intensité faible, cinq minutes, faire inhalation d'ozone avec l'électrode n. 28.

OBESITE. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, Dix minutes, intensité moyenne, massage général du corps avec l'électrode n. 2.

OEIL. — Appliquez l'électrode n. 7 sur l'œil fermé, intensité faible.

OREILLES. — Traitement avec l'électrode n. 12 qui ne doit pas être introduite trop profondément, trois minutes deux fois par jour, intensité faible (voir fig. 8.)



Fig. 8.

OVAIRES. — Effluves à l'aide de l'électrode n. 2 le long des aines et sur le bas-ventre, cinq minutes.

PANARIS. — Même traitement que pour l'abcès (Voir ce mot)

PELLICULES. — Masser le cuir chevelu avec l'électrode n. 4.



PARALYSIE INFANTILE
Provoquer des réactions musculaires avec des effluves espacées, électrode n. 2, le traitement de la paralysie étant long, il faut continuer avec persévérance.

PROSTATITES. — Même traitement que pour les hémorroïdes en employant l'électrode n. 22.

REINS. — Massage avec l'électrode n. 2. Dix minutes, deux fois par jour, intensité moyenne. (voir fig. 11).

RHUMATISME. — Traitement de saturation avec l'électrode n. 14, effluve sur l'articulation douloureuse avec l'électrode n. 2. Dix minutes.



Fig. 10.



Fig. 11.

SCIATIQUE. — Traitement avec l'électrode n. 2 à passer le long de la cuisse, dix minutes au moment de l'attaque. Voir le mot arthritisme.

SEINS. — Pour raffermir ou développer les seins, coiffer le mamelon avec l'électrode n. 26 pendant dix minutes tous les



jours, effluves autour du sein pendant deux minutes avec l'électrode n. 1 (voir fig. 14).

VARICES. — Masser les veines visibles avec l'électrode n. 1 pendant cinq minutes deux fois par jour.

VERRUES. — Fulguration d'une minute tous les jours jusqu'à disparition avec l'électrode n. 9.



CORRECTION DES RIDES



INSTRUCTIONS GENERALES

1. — Ne jamais mettre d'huile ni de graisse dans l'appareil.
2. — Vérifier le voltage 110 ou 220 volts.
3. — Mettre l'appareil en relation avec la source électrique.
4. — Fixer l'électrode dans le manche ébonite (pour la saturation et électrodes internes, voir plus loin).
5. — Si le générateur ne bourdonne pas aussitôt, tourner la vis de réglage du côté FORT.

Pour l'emploi du saturateur et des électrodes internes.

- a) Relier l'appareil à la prise de courant sans le faire fonctionner.
- b) Fixer le saturateur dans le manche en ébonite, tenir le saturateur bien serré dans la main et mettre l'appareil en fonctionnement.
- d) Le traitement terminé, interrompre le courant et enlever la prise

RECOMMANDATIONS : Ne jamais retirer la main du saturateur pendant que le courant est établi, afin de ne pas s'exposer à ressentir une secousse désagréable, mais absolument sans danger.

Pour l'emploi de l'appareil il est préférable de se placer sur un parquet ou un sol isolé, ne pas toucher de robinets d'eau ou de gaz, ne pas l'utiliser lorsque l'on est dans le bain.

Si vous n'utilisez pas l'appareil ne le laissez pas inutilement sur le courant, débranchez-le.

POUR L'INHALATEUR D'OZONE


- a) Fixer l'inhalateur dans le manche comme une électrode ordinaire.
- b) Pour l'usage, tenir l'inhalateur d'une main et actionner la poire de caoutchouc de l'autre. (Voir figures 3 et 4).

ELECTRODES


Nos électrodes sont faites en verre spécial, ce qui leur permet de résister à de brusques contractions et à la dilatation due à la chaleur.

Toutes nos électrodes sont munies d'une douille de cuivre de 11 mm. du type maintenant reconnu universel.


NOMENCLATURE DES ELECTRODES

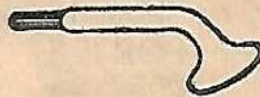


1. — Electrode de surface pour le traitement superficiel
du corps et du visage fr. 30,—

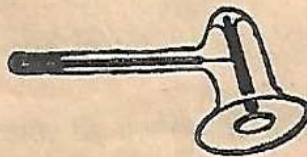

2. — Condensatrice pour traitement intensif des organes
situés profondément dans le corps fr. 50,—

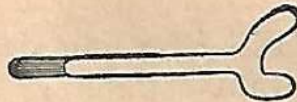

3. — Electrode pour le traitement de la colonne vertébrale.
fr. 25,—

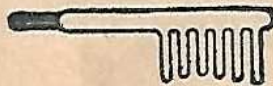

4. — Peigne pour le traitement du cuir chevelu fr. 25,—



5. — Pinceau pour stimuler les nerfs fr. 25,—



6. — Exo-Laryngée, pour application externe de la
gorge et de la nuque fr. 25,—



7. — Oculaire pour stimuler le nerf optique fr. 25,—



8. — Spirale pour traitement du coeur fr. 30,—



9. — Fulgulatrice pour le traitement des vernues, cors,
etc. fr. 25,—



10. — Pour les paupières fr. 25,—



11. — Nasale isolée fr. 25,—



12. — Auriculaire isolée fr. 25,—



13. — Intra-Laryngée, traitement interne de la gorge, fr. 25,—



14. — Saturateur pour traitement tonique et électrifica-
tion (d'Arsonvalisation. fr. 25,—



15. — Spatule électrode de la langue, s'emploie en cas
de fièvre. fr. 25,—



16. — Urétrale, pour les maladies du canal et de la vessie fr. 25,—




17. — Vaginale toute surface active. fr. 30,—



18. — Vaginale, extrémité seule active fr. 35,—




19. — Vaginale isolée et perforée pour génération de l'ozone fr. 35,—

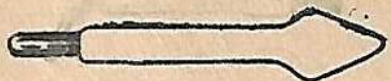


20. — Rectale ordinaire fr. 25,—




21. — Rectale toute surface active fr. 25,—

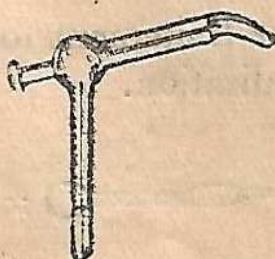

22. — Prostate, système Bub fr. 100,—

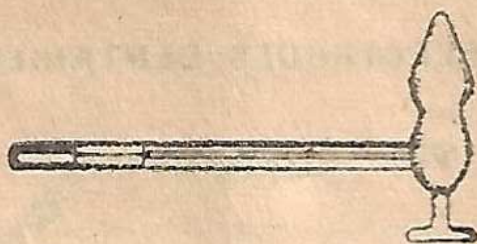

23. — Hémorrhédaire pour traitement personnel, système Bub fr. 100,—

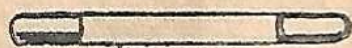


24. — Tube témoin bouts métalliques aux deux extrémités fr. 25,—




25. — Pour traitement de plaies, avec surface concave, pour introduire de l'ouate imbibée de substances médicamenteuses. fr. 25,—




- 25b. — Cataphorétique, grand modèle fr. 30,—

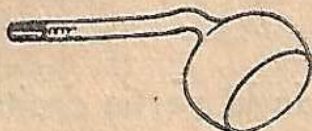

26. — Pectorale pour le développement des seins fr. 50,—

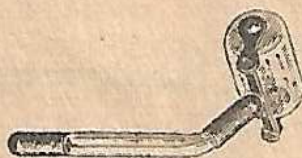

27. — Forme rouleau pour massage du corps et du visage, remplace avantageusement l'électrode de surface n. 1 qui, devant glisser donne un léger contact fr. 75,—

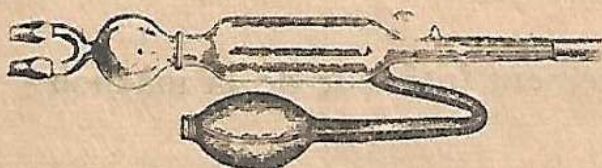

28. — Inhalateur avec pulvérisateur dans la sphère. Produisant l'ozone souverain pour guérir rhumes, gripes, pneumonie, soulageant toutes maladies des voies respiratoires. fr. 100,—

ELECTRODES DENTAIRES




a) Dentaire à fulguration fr. 30,—



b) Cataphorétique pour dentiste fr. 30,—



c) Tête creuse fr. 30,—

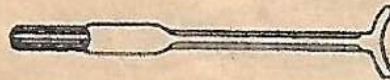

d) Pour le traitement des gencives de devant fr. 30,—



e) Pour le traitement de la partie droite de la mâchoire fr. 30,—



f) Pour le traitement de la partie gauche de la mâchoire fr. 30,—



g) Pour le traitement intérieur de la mâchoire fr. 30,—

Aucune électrode n'est reprise ni échangée après livraison

L'Ozone en Thérapeutique

L'OZONE

L'ozone est connu dans la médecine comme un élément antiseptique très efficace. Il a la faculté de détruire les microbes moyennant un procédé d'oxydation et de stimuler les cellules vitales. L'inhalation d'ozone par notre organisation détruit les éléments usés et malades, fortifie le sang et produit un état de bien-être du malade, ce qui est très important pour les mélancoliques et les neurasthéniques. L'ozone est spécialement employé contre les maladies du nez, de la gorge et des poumons. L'inhalateur guérit en peu de temps et de façon efficace la toux, le rhume, le catarrhe, la grippe, la bronchite, les maladies du larynx, l'insomnie, l'asthme, la pneumonie, la tuberculose et toutes maladies des organes de la respiration.

Action physiologique et thérapeutique de l'ozone

Un grand nombre de maladies (anémie, coqueluche, laryngite, etc) sont traitées par l'ozone, qui donne également des résultats très satisfaisants dans le traitement de la tuberculose.

L'OZONE EN THERAPEUTIQUE

Dans l'air renfermant 1 milligr. 5 à 2 milligr. d'ozone par litre, la bactérie charbonneuse, le bacille d'Eberth, le staphylocoque, le bacille de Löffler, les spores d'*Aspergillus niger* ne se développent pas en culture. Les cultures de charbon sont tuées au bout de quatre jours.

ACTION PHYSIOLOGIQUE DE L'OZONE

L'hémoglobine, matière colorante du sang veineux, se transforme, pendant la respiration, en oxyhémoglobine, matière colorante du sang artériel, en absorbant l'oxygène et que, réciproquement, l'oxyhémoglobine du sang artériel, échangeant avec les tissus son oxygène, redevient hémoglobine. Dans les globules rouges l'oxygène est à l'état d'ozone, expliquant ainsi l'activité des oxydations qui se produisent dans l'organisme par les échanges entre le sang et les tissus.

Au moyen de l'hématospectroscope, on a pu constater rapidement et très simplement les modifications de l'oxyhémoglobine du sang sous l'influence de l'O₃.

Sous l'influence même d'une inhalation d'ozone de dix minutes de durée, l'oxyhémoglobine augmente chez des sujets bien portants d'une façon remarquable, à la condition toutefois que ces sujets présentent une proportion d'oxyhémoglobine un peu inférieure à la moyenne physiologique qui est de 14 p.c. Des expériences faites, l'augmentation a été jusqu'à 2 p.c.

Action de l'O₃ sur les globules rouges et blancs

De nombreuses expériences faites sur des petits malades, il résulte de la numération faite avant et après un certain temps de traitement par l'ozone (trois semaines, un mois), que le chiffre des globules rouges a subi une ascension proportionnelle à l'augmentation de l'oxyhémoglobine.

En même temps qu'on constate une augmentation des globules rouges, toujours parallèle à l'augmentation de l'oxyhémoglobine, on a pu observer une progression décroissante des globules blancs.

L'Ozone dans la tuberculose pulmonaire

Les uns, déjà très avancés dans leur évolution tuberculeuse n'en ont retirés que peu ou pas de bénéfices, les autres ont presque tous obtenu un arrêt dans la

Il serait trop long de reproduire ici toutes les feuilles d'observation. Contentons-nous de signaler que des malades partis de 7 à 10 p.c. d'oxyhémoglobine, ont gagné respectivement de 5 à 1 p.c., l'augmentation moyenne de poids était d'environ trois kilos, retour à l'appétit suppression des sueurs et des vomissements, la toux devient de plus en plus rare pour ne plus se produire qu'au réveil, avant de disparaître complètement. L'expectoration purulente devient muqueuse et de moins en moins abondante. Aucune hémoptysie ne s'est reproduite pendant le traitement.

L'Ozone dans la coqueluche

Il ressort d'une façon manifeste et évidente, que l'ozone a produit chez tous les petits malades une amélioration immédiate ; chez presque tous, les quintes ont été rapidement modifiées, non seulement comme fréquence, mais aussi comme intensité et durée ; l'angoisse respiratoire et la cyanose devenaient presque nulles et les vomissements disparaissaient. Les enfants reprenaient presque rapidement leur gaieté et leur bonne mine antérieure. Aucun des petits malades ne fut atteint de complications broncho-pulmonaires si souvent observées et si justement redoutés dans cette maladie.

Lorsque pour une cause quelconque on suspend le traitement pendant un jour ou deux, on voit les quintes reparaître avec toute leur intensité. Ce qui démontre la réelle et indiscutable action de l'ozone dans cette affection.

L'action physiologique de l'ozone sur le sang est également bien intéressante à étudier. Le nombre de globules rouges augmente rapidement dans des proportions parfois étonnantes. Des malades présentant au début du traitement une pauvreté globulaire manifeste, voient rapidement le nombre des globules rouges augmenter de 50 p.c. et parfois même de 100 p.c. Cette augmentation n'est pas passagère, elle se maintient aussi longtemps que l'on administre les solutions d'ozone. Quand on cesse, nous avons pu le constater chez des malades à peu près guéris et qui interrompent de temps à autre leur traitement, le nombre de globules rouges reste néanmoins légèrement supérieur à la normale. L'hyper-érythémie constatée paraît bien être due à l'ozone et nous sommes d'avis qu'il faut attribuer l'augmentation des globules rouges chez les tuberculeux en montagne et au bord de la mer, à la présence de ce gaz dans l'atmosphère.

On a remarqué, d'autre part, que les écoles munies d'installation d'ozone ne renvoyaient aux écoles de plein air pour raison de santé, qu'un nombre d'enfants très inférieur aux autres.

Ce que dit la revue « Science et la Vie »

« Comment l'on constata que l'ozone est favorable à la santé.

» Des récents essais effectués sur des employés de la First National Bank de Chicago, ont montré qu'en respirant de l'air ozonisé, la respiration devenait plus profonde, et qu'au bout d'un certain temps l'on pouvait constater une importante augmentation de poids des sujets soumis à l'expérience.


» Les employés de la banque furent placés dans une salle où l'on n'avait jamais pu obtenir jusqu'alors une bonne ventilation ; de l'ozone fut produit dans la salle même au moyen de quelques machines électriques placées dans les coins.

» On mesura le tour de poitrine de chaque employé, on nota son poids, et deux mois après le jour où les machines électriques furent mises en activité, les mêmes mesures furent effectuées; l'on trouva que, dans ce court espace de temps, chaque employé avait gagné en poids aussi bien qu'en largeur de poitrine.

» Cette amélioration physique fut accompagnée d'un tel développement de leurs facultés mentales que les employés eux-mêmes, enthousiasmés des résultats demandèrent qu'on généralisât la méthode.

A black and white illustration of a dental kit in an open case. The case is open, revealing various dental instruments neatly arranged in the upper compartment. These include a large dental mirror, several probes and explorers, a pair of forceps, and a dental chair. The lower compartment contains a coiled dental hose or cable, a dental chair, and other accessories. The case is shown from a slightly elevated perspective, highlighting its sturdy construction and the organized layout of the tools.

750 Frs

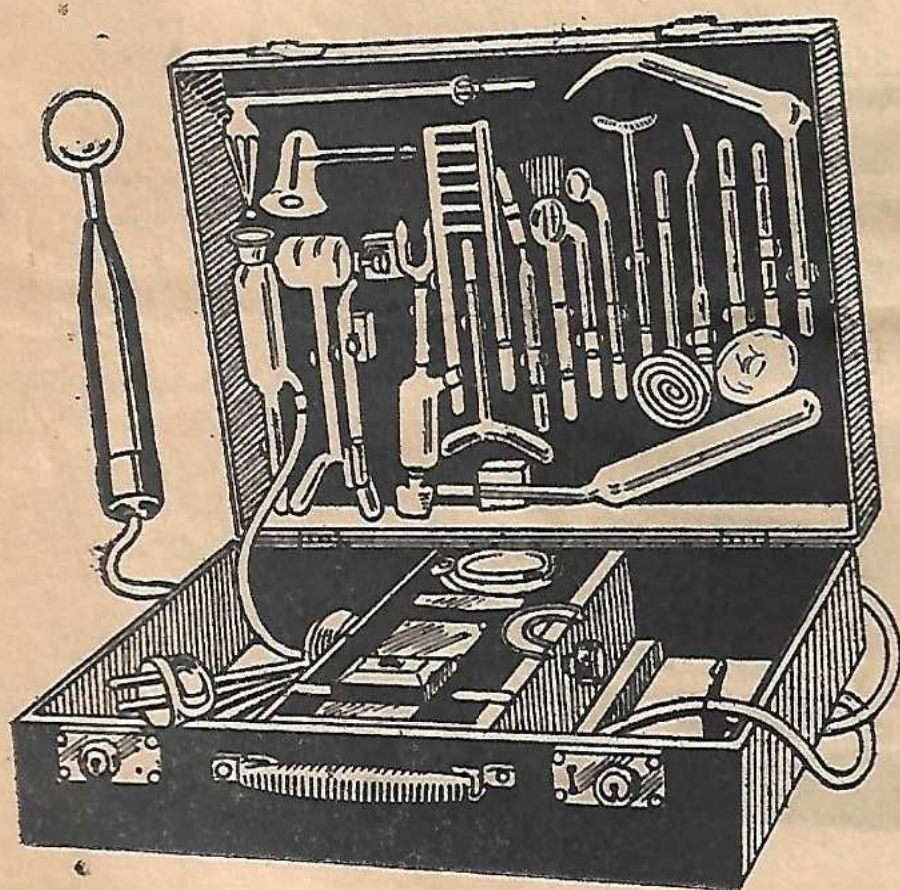

Modèle B

PRIX
Frs.
1250

Modèle C



PRIX

1950 Frs.

IMPRIMERIE PASTUR

14, Boulevard du Midi, Bruxelles

Tél. 11,70,84

Cerveau

Nuque


Centre des épaules

Centre du dos

Hanches

Extrémité de la
Colonne vertébrale

Le grand sympathique

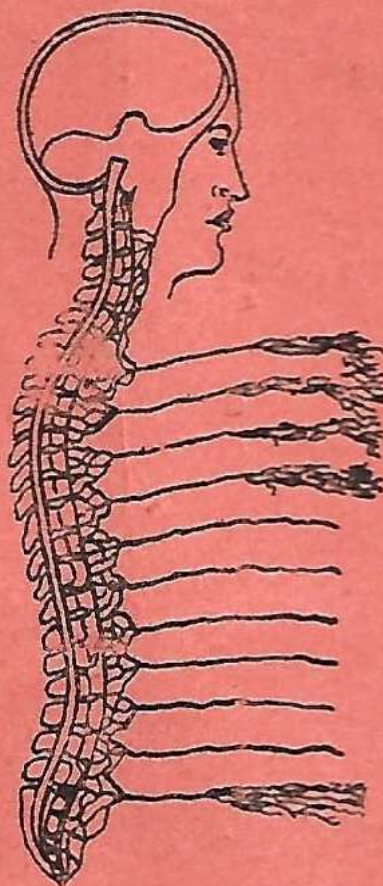

Nerfs conduisant aux :

. bras
. poumons
. coeur
. estomac
. foie
. reins
. vessie
. abdomen
. organes sexuels
. jambes
. rectum

Le centre nerveux du corps humain est le grand sympathique,
qui se trouve le long de la COLONNE VERTEBRALE.

Il est prouvé aujourd'hui, que le célèbre Claude Bernard de France avait raison en affirmant
que

« Le Microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout »

et

« A système nerveux normal, santé normale ».

Car la médecine de demain consistera uniquement par le traitement du grand sympathique (centre nerveux) et le saturateur qui est un désinfectant puissant du sang, dans la guérison de toutes les maladies indistinctement et, je puis l'affirmer en connaissance de cause, qu'il n'y a pas de MEILLEURE METHODE ; puisque nous avons obtenu de nombreuses guérisons, sur des malades qui avaient tout essayé, tout tenté depuis de longues années, sans obtenir de résultat et même déclarés « incurables ».

Je tiens des listes complètes de références à la disposition des personnes qui les désirent.

L'ENERGICO-MEDICAL.

Ce livre d'instructions et de traitements est
GRATUIT

Vous ferez une bonne oeuvre en le prêtant à
toutes vos connaissances, qui souffrent et qui
ignorent nos appareils qui guérissent et pré-
viennent tant de maux si différentes.

Je dis aussi prévenir car, n'oubliez pas,
que guérir c'est très bien, mais prévenir est
infiniment mieux et cela pour une somme
minime, alors que VOTRE SANTE VAUT
UNE FORTUNE INCALCULABLE ! !