

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES & DE FABRICATION
D'APPAREILS MÉDICAUX

41, Avenue Foch - PARIS 16^e
Téléphone : POI. 42-20

LA GALVANOTHÉRAPIE

thérapeutique
moderne
à domicile

contre
rhumatismes
& toutes douleurs
musculaires
& articulaires
sciatique
arthrite
lumbago
arthrose
goutte
etc...

qu'est-ce que la galvanothérapie ?

La GALVANOTHÉRAPIE est une méthode de traitement des organismes ou organes vivants par des courants électriques continus faibles.

Le Galvanisme fut découvert par le physicien GALVANI (d'où son nom) et orienta VOLTA vers la construction de la pile électrique. Depuis les travaux des frères d'ALIMONDA, qui ont appliqué le galvanisme aux traitements des affections humaines, on sait que les perturbations de l'électricité cellulaire de notre organisme sont la cause essentielle de nombreuses maladies.

La GALVANOTHÉRAPIE a pour but d'y remédier en faisant circuler dans le corps du courant galvanique de faible intensité.


C'est notamment dans le domaine des douleurs rhumatismales, musculaires ou articulaires, chroniques ou aiguës, récentes ou anciennes que le traitement galvanique donne des RÉSULTATS SPECTACULAIRES, là où bien d'autres moyens ont échoué.

Chez les malades des articulations et les rhumatisants par exemple, les déchets nocifs (uriques ou oxaliques) se déposent en divers endroits de la musculature (rhumatismes musculaires), près des nerfs, (sciatique), dans les articulations (arthrite et goutte) sur les vertèbres (lumbago). Ces dépôts avec les années s'accumulent, se cristallisent solidement, et provoquent de violentes douleurs.

Avec la GALVANOTHÉRAPIE le courant galvanique pénètre partout dans la moindre partie du corps, dans chaque cellule, traverse la peau, les muscles, les nerfs, les vertèbres, les articulations, active les moyens d'élimination (urine et sueur) et débarrasse le corps de ses déchets. Il active également la nutrition des tissus en leur permettant une meilleure respiration.

Par ailleurs, le courant galvanique est la seule force que notre organisme puisse recevoir artificiellement en grande quantité, sans danger car c'est le courant qui est engendré normalement par le corps humain.

Enfin, le courant galvanique ne procure pas de sensations désagréables et peut donc être utilisé par tous.

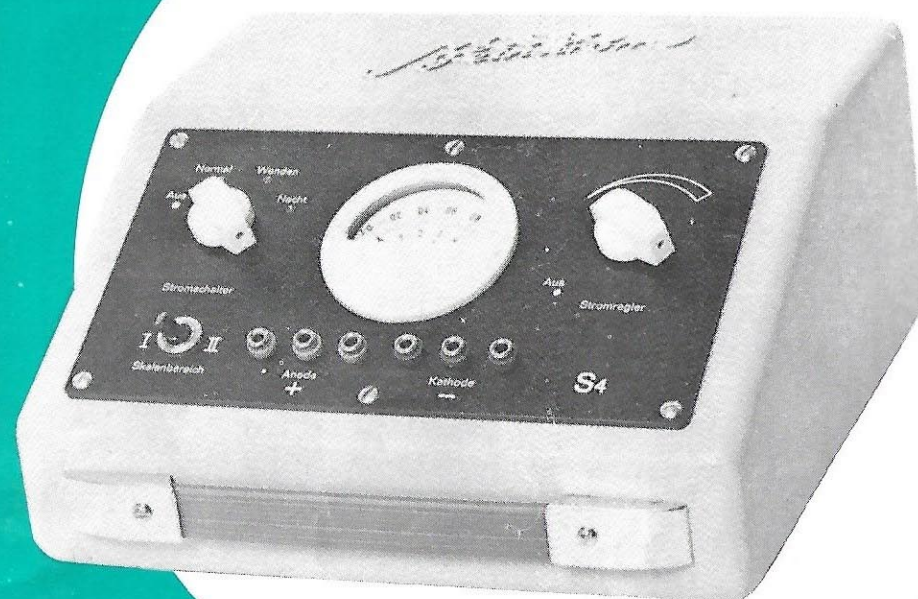

Il existe divers appareils pour le traitement galvanique à domicile. Mais le MOSER S 4, résultat de longues recherches, est vraiment l'application la plus moderne de la Galvanothérapie.

C'est un appareil absolument sûr, sans danger, de manipulation aisée, qui vous rendra les plus grands services, à vous-même et à votre famille, toute votre vie. En effet, le Moser S 4, allie la solidité à la précision : il est garanti totalement 2 ans. La durée de la pile, pour une utilisation d'une demi-heure par jour, est d'environ 2 ans.

Il est bon de rappeler ici que si l'action du courant galvanique est particulièrement remarquable sur les rhumatismes, sciatique arthrite, arthrose, etc..., ce courant donne également de très bons résultats dans les cas de trouble de la circulation sanguine, migraines, insomnies, nervosité, tension artérielle etc...

TRÈS IMPORTANT - Il est très important avant les applications partielles ou locales, de commencer par une cure de Galvanothérapie totale. Pour cela, vous pouvez procéder à votre gré comme il est indiqué sur les illustrations 1, 2 et 3.

1) TRAITEMENT GALVANIQUE TOTAL

contre
toutes douleurs
musculaires
& articulaires

Electrode positive
dans la main gauche.

Electrode négative
dans la main droite
5 minutes le matin.



2) TRAITEMENT GALVANIQUE TOTAL

contre
toutes douleurs
musculaires
& articulaires

Electrode positive
sur la nuque

Electrode négative
sous les pieds


15 minutes le soir



3) TRAITEMENT GALVANIQUE TOTAL (Méthode Recommandée)

Electrode positive
sur la nuque

Electrode négative
dans un bain de pied
20 minutes le soir

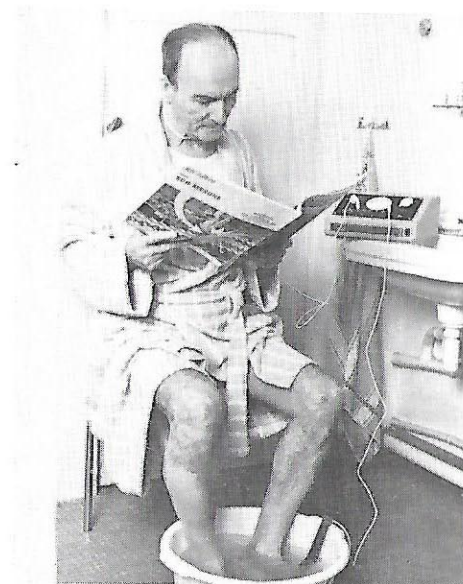


4) TRAITEMENT GALVANIQUE PARTIEL Douleurs Musculaires de l'Épaule

Electrode positive
sur la nuque


Electrode négative
sur le haut du bras

10 à 15 minutes
chaque jour

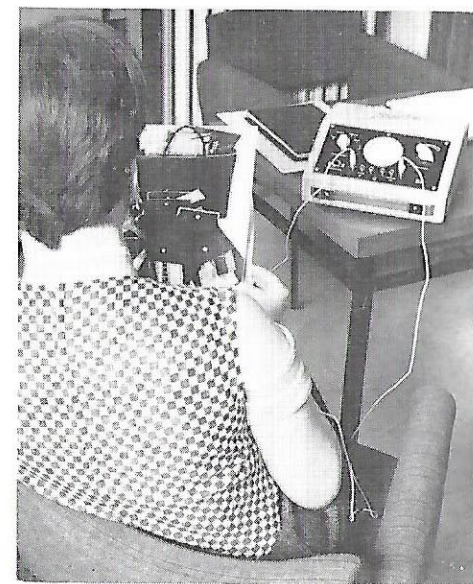


TRAITEMENT GALVANIQUE PARTIEL

5) ARTHRITE DE L'ÉPAULE

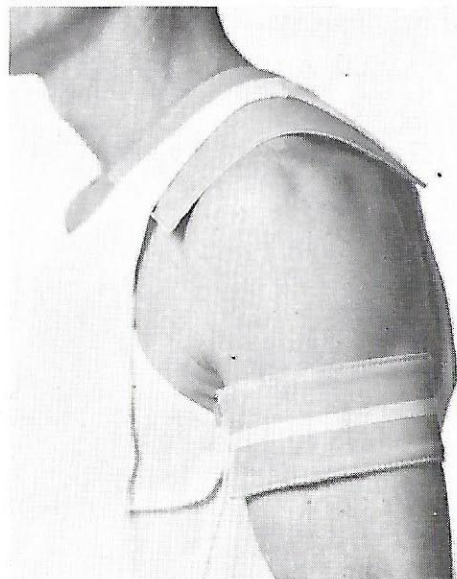

Electrode positive
sur l'épaule
Electrode négative
sur le haut du bras
10 minutes chaque jour


6) ARTHRITE DU COUDE

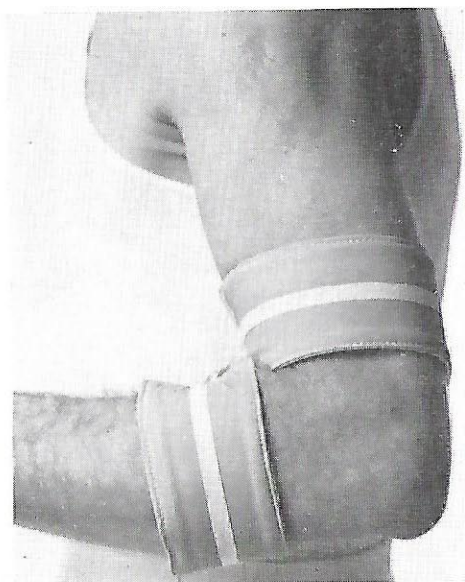

Electrode positive
au-dessus du coude
Electrode négative
en dessous du coude
10 minutes chaque jour


TRAITEMENT GALVANIQUE PARTIEL

7) SCIATIQUE ARTHROSE DE LA HANCHE

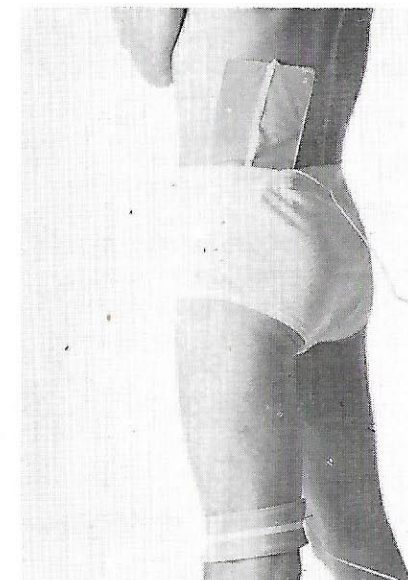

Electrode positive
sur la hanche
Electrode négative
au-dessus du genou
15 à 20 minutes
chaque jour


8) LUMBAGO DOULEURS DU DOS

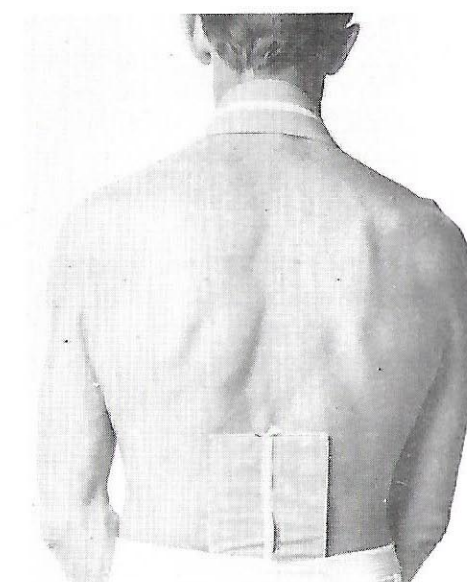

Electrode positive
sur la nuque
Electrode négative
sur le bas de la colonne
vertébrale
15 à 20 minutes
chaque jour

TRAITEMENT GALVANIQUE PARTIEL

9) ARTHRITE ET ARTHROSE DU GENOU

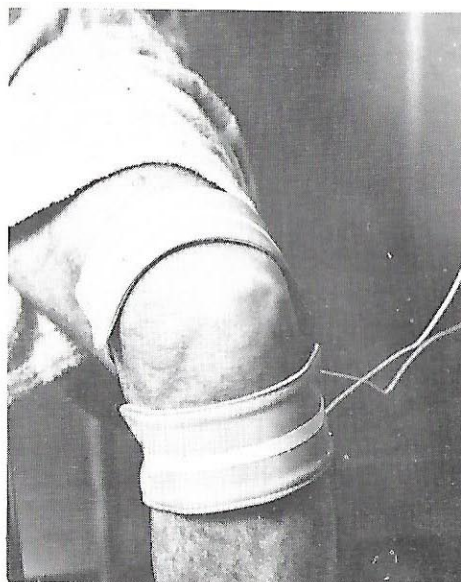

Electrode positive
au-dessus du genou
Electrode négative
au-dessous du genou
10 à 15 minutes
chaque jour

10) GOUTTE ARTICULATIONS CHEVILLES ET PIEDS



Electrode positive
au-dessus de la cheville
Electrode négative
sous le pied
10 à 15 minutes
chaque jour

Qu'en disent les Médecins ?

"L'action sédative de la galvanothérapie est particulièrement nette en cas de douleurs musculaires et articulaires. Et partout où il est nécessaire d'améliorer la circulation sanguine, le courant galvanique s'avère extrêmement utile grâce à son action sur les vaisseaux qu'il dilate".

(Extrait de "Physiothérapie" du Professeur KOWARSCHIK)

"Comme le courant galvanique pénètre très profondément ses ions jusque sur les centres nerveux, il est facile de comprendre que ce courant agit sur les endroits malades, en les transformant, en les revalorisant, en les améliorant, comme le Professeur REMARK l'a spécifiquement démontré".

(Extrait du "Traité de Physiothérapie" - (1^{ER} volume) du Professeur BERNHARDT)

"C'est pourquoi un traitement galvanique est indiqué pour toutes les maladies musculaires et articulaires".

(Extrait de "La Physiothérapie" éditions Carl MARHOLD, par le Professeur LAQUEUR-ANKARA)

"Nous avons, avec le courant galvanique, un excellent moyen de combattre les douleurs musculaires. On obtient un bon résultat même là où les autres méthodes habituelles ont échoué".

(Professeur KOWARSCHIK)

"La galvanothérapie nous rend de grands services dans les affections rhumatismales les plus diverses, des articulations et des muscles. Des cas anciens d'arthrose à la hanche, aux genoux, qu'aucun traitement n'avait réussi à enrayer, ont fort bien réagi au courant galvanique et souvent de façon surprenante".

(Extrait de "La Physiothérapie" - Editions Springer par le Professeur KOWARSCHIK)

"Et c'est ainsi que le traitement galvanique est indiqué pour toutes les affections musculaires et articulaires."

(Professeur LAQUEUR-ANKARA)

Qu'en disent les Médecins ?

"Grâce à une circulation sanguine plus intense, les inflammations disparaissent".

(Professeur LAMPERT - 1954)

"L'emploi régulier du courant galvanique est tout à fait indiqué dans les cas les plus divers de névralgie, de névrite, de goutte et de sciatique. L'action sédative de la galvanothérapie se manifeste toujours de façon convaincante"

(Extrait de "L'Électrothérapie" - (3^e éditions 1954) par le Professeur LAMPERT)

"En raison de son action sédative, le courant galvanique est employé dans les cas les plus divers de névralgie et de névrite qu'il traite avec efficacité. Son action sédative se manifeste aussi efficacement dans les cas de douleurs musculaires et articulaires les plus diverses".

(Professeur KOWARSHIK)

"Il existe de nombreuses maladies en particulier des névralgies pour lesquelles la galvanothérapie surpasse de loin toute les autres méthodes".

(Professeur KOWARSHIK)

"Cette action se produit sur les nerfs en diminuant tout d'abord les douleurs, en les faisant disparaître ensuite".

(professeur LAQUEUR)

"Le courant galvanique rétablit l'état normal dans les cas pathologiques, de troubles des nerfs sensitifs et combat ainsi activement les douleurs".

(Professeur LAQUEUR)

"La galvanothérapie arrive à provoquer une baisse de la tension artérielle".

(Professeur LAMPERT)

Qu'en disent les Médecins ?

"La galvanothérapie dépasse de loin toutes les autres méthodes car elle est tout à fait sûre".

(Extrait de "Médecine" et de "Médizinisch Welt" n° 2 par le Docteur REICHERT)

"Le succès de la galvanothérapie étonne beaucoup de médecins en raison de son extraordinaire rapidité".

Extrait de "La Physiothérapie" : Diagnostics et Traitements par le Professeur HOLZER)

"Trois effets importants de la galvanothérapie :

- effet sur les muscles.
- effet sur les vaisseaux sanguins.
- effet sur les nerfs".

(Extrait de "Le courant galvanique" par le Docteur ZITKA VIENNE)

"On peut, à l'aide du courant galvanique, arriver à de bons résultats là où d'autres moyens ont échoué".

(Docteur ZITKA)

"Nous citerons aussi les expériences de GUILLOZ qui ont montré que des muscles isolés de l'organisme et traversés par du courant continu, présentent un accroissement net des échanges respiratoires (oxygène consommé et acide carbonique rejeté)".

(GUILLOZ)

*